


PATIENTORIENTERING


Hjemmeblodtryksmåling

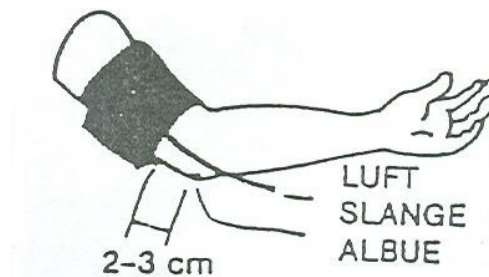




VEJLEDNING TIL BLODTRYKSAPPARATER UA-777 OG UA-779

1. Anbring manchetten på venstre overarm 2-3 cm over albueledet. Manchetten skal kun stramme så meget, at man kan få en finger ind under denne.

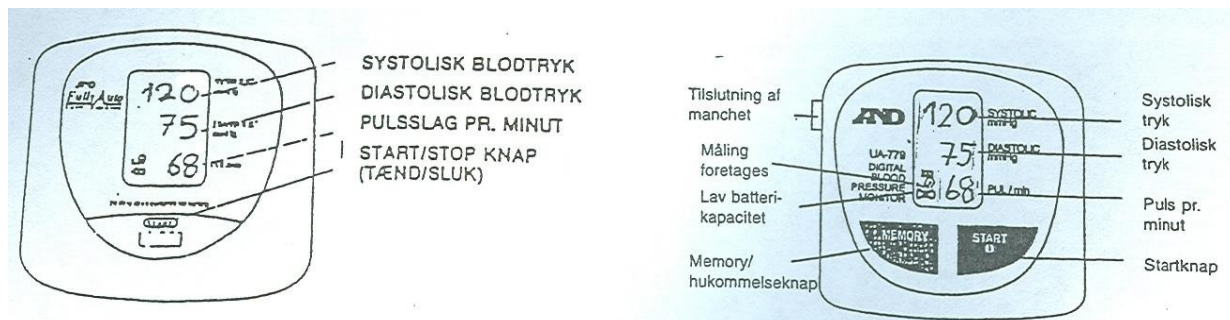

2. Tryk på startknappen. Oppumpningen af manchetten finder sted, når displayet viser: 0.
3. Når oppumpningen er slut, vil det automatiske udluftningssystem gradvist regulere trykket i manchetten, og målingen af blodtrykket og pulsen foretages.
4. Når blodtryksmålingen er slut, høres en biplyd. I displayet vil der kunne aflæses to blodtryk (det høje og det lave blodtryk kaldet henholdsvis systolisk og diastolisk blodtryk) samt puls (antal pulsslag pr. minut).

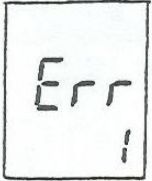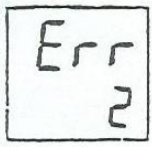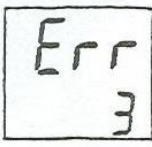

Symbol	Fejlmeddelelse/ årsag	Forholdsregler
	Blinker så længe blodtryksmålingen foretages.	Bliv siddende til målingen er slut.
	Batterierne er svage.	Skift alle fire batterier på en gang. Brug gerne alkaliske batterier.
	Fejlmeddelelser som fortæller, at blodtryksmålingen ikke kan foretages korrekt:	
	Err 1: Denne fejlmeddelelse vil fremkomme, hvis forskellen mellem det systoliske blodtryk og det diastoliske er indenfor 10 mmHg.	Kontroller, at luftslangen er monteret korrekt til apparatet, og at manchetten sidder rigtigt. Gentag derefter målingen. NB! Sluk først apparatet og vent et par minutter. Sid stille og hold Dem i ro under målingen.
	Err 2: Denne fejlmeddelelse vil fremkomme, hvis trykket er ustabil pga. bevægelse under målingen.	
	Err 3: Denne fejlmeddelelse vil fremkomme, hvis trykket ikke stiger under oppumpningen.	